


# コンポジットレジンヒーター

## 取扱説明書



ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

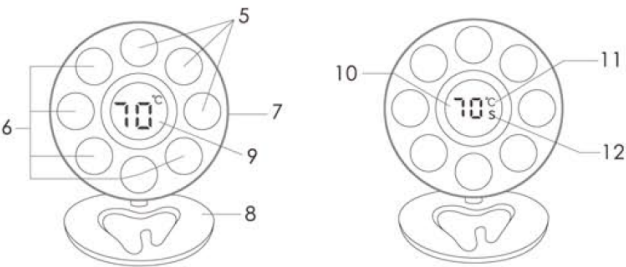

### 3、状態／モードの説明

- 3.1 待機状態：画面に「-.-°C」と表示されます。
- 3.2 加熱モード：数字表示部は常時点灯し、温度記号が点滅します。システムの設定温度に達したか、HEATERの温度がシステムの設定温度を上回った場合：数字表示部は常時点灯し、温度記号も常時点灯します。
- 3.3 モード設定：数字表示部は常時点灯し、「S」が点滅します。

### 4、取扱説明

- 4.1 電源を接続すると、デジタル表示部には常に「-.-°C」と表示されます。
- 4.2 電源を接続した後、「ON/OFF/SET」ボタンを1回押すとHEATERは、前回の電源オフ時の設定温度に従って加熱状態になります。設定温度に達すると、自動的に加熱を停止します。
- 4.3 電源を接続した後、「+」または「-」を1回押して設定モードに入ります。「+」を押すと設定温度が上がり、「-」を押すと設定温度が下がります。設定後、「ON/OFF/SET」を1回押して加熱状態に戻します。設定温度に達すると、自動的に加熱が停止します。

#### 注意：

設定モードで「+」または「-」を長押しすると、設定温度を素早く上げたり下げたりできます。設定温度範囲（40～70）内の任意の整数を選択可能です。

- 4.4 回路が動作状態のときに「ON/OFF」／「SET」ボタンを押すと、動作が停止し、待機状態になります。その後、「+」または「-」ボタンを押して設定モードに入ります。


### 1、製品紹介：

1. 1、本ヒーターは、樹脂、ブランスキャン寒天、次亜塩素酸ナトリウムの加熱に適しています。精密な回路制御と輸入加熱管を採用しており、加熱対象に応じて40～70°Cの範囲内で任意の整数値の温度を設定できます。
1. 2、対象物質と推奨温度

| No. | 材質         | 推奨温度（°C）     |
|-----|------------|--------------|
| 1   | 樹脂（充填用）    | 39           |
| 2   | 樹脂（接着用）    | 55           |
| 3   | ブランスキャン    | 38           |
| 4   | アガーフィルム    | 融点 99；絶縁性 60 |
| 5   | 次亜塩素酸ナトリウム | 60           |

### 2、構造

- 1——ON/OFF/SET
- 2——増加キー
- 3——減キー
- 4——DC
- 5——60mmの加熱穴
- 6——70mmの加熱穴
- 7——加熱ベース
- 8——支持脚
- 9——表示画面
- 10——温度表示
- 11——温度／加熱信号「°C」
- 12——設定信号「S」

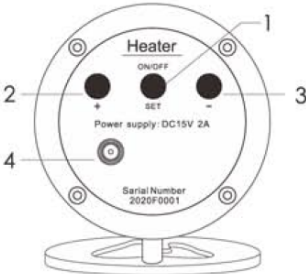

### 5、技術仕様

- 5.1 電源アダプター：入力：AC 100～240V 50/60Hz、出力：DC15V 2A
- 5.2 加熱温度範囲：40°C～70°C、±1°C

### 6、お手入れ

加熱ベースは、アルコールを含ませたコットンボールで拭いて消毒することができますが、本体全体を液体に浸すことはできません。

注意  
ヒーターベースの表面を清掃する際は、まず電源コードを抜いてください。  
ヒーターベースが冷めるまで待ってから、清掃を行ってください。

### 7、輸送および保管環境

本製品は、通気性が良く、乾燥した涼しい場所で、熱源から離れ、腐食性ガスのない場所に保管してください。  
輸送中は、湿気、光、熱源から保護してください。

#### 保管条件



#### 輸送条件



### 8、保証

1年

#### △ 注意事項

1. ヒーターは使用中に高温になります。火傷に注意してください。
2. 使用時は、発熱体および台座の表面に傷がつかないようにご注意ください。

連絡先  
kashika.jp@gmail.com  
URL:<https://www.kashika.jp/>